



**OSTEOBIT™**

**ICEA®**


TECHNOLOGY FOR CLINICAL BIOPHYSICS.

**J.B. Implants Services bv**

Robijnborch 7  
5241 LK Rosmalen  
jblock@knoware.nl

Tel. 073 5220780  
Fax 073 5221245  
Mob.06 53460884


# OSTEOBIT™

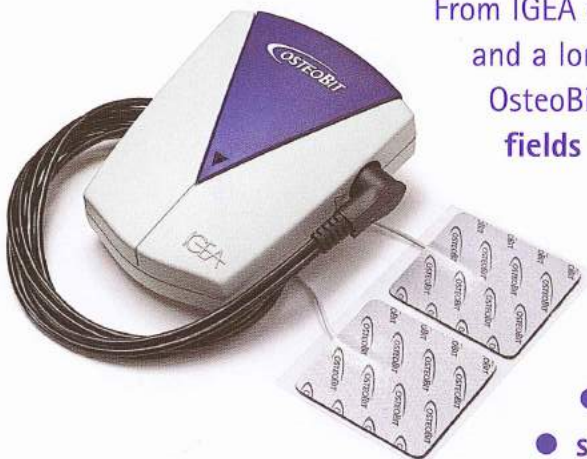

From IGEA experience in the field of osteogenetic stimulation and a long lasting research in Clinical Biophysics, here comes OsteoBit: the most innovative solution in the use of electrical fields to enhance bone healing.

With OsteoBit, IGEA confirms its commitment in orthopaedics and traumatology providing updated solutions for the treatment of

- fresh fractures
- stress related fractures
- non-unions of upper limbs

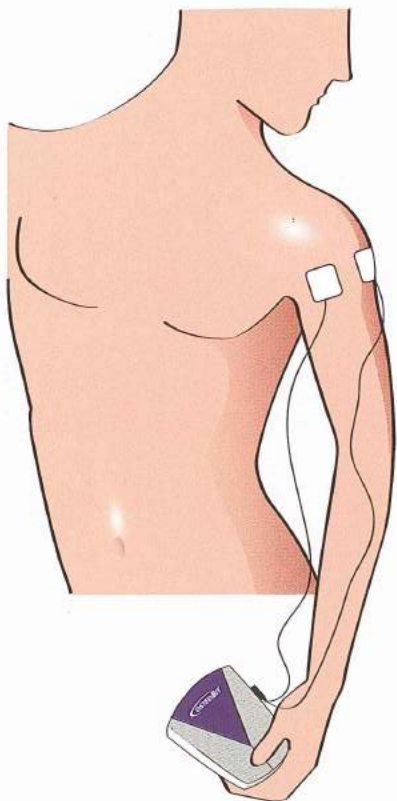

## FOS (Focused Osteogenetic Signal)

The process of mineralization changes the specific electrical characteristics of the repairing tissue. OsteoBit is able to detect and adjust the generated signal, so as to keep constant the value of voltage density ( $1530 \text{ A/cm}^2$ ) in the fracture site, during the different formation phases of the bone callus.

This exclusive and patented technology ensures the supply of a Focused Osteogenetic Signal for the whole duration of the treatment.

Weight:  
Size: 100 x 7  
Rechargeable b


Built in compliance  
Electrical safety cert  
In respect with directi

A technology is innovative when it is able to combine experience and efficacy with ease of use

The stimulation of endogenous osteogenesis through electric and magnetic fields is a therapeutic option, which is widely accepted, in modern orthopaedics and traumatology. **IGEA has developed the principle of Focused Osteogenetic Signal (SOF) and has conceived and patented a micro-technology that makes FOS effects even more effective: OsteoBit.**

Like every piece of technology from IGEA, the efficacy of OsteoBit has been clinically tested without any negative collateral effects. **Clinical studies carried out with OsteoBit have pointed out an 89,5% success rate in treating failed consolidations.**

EFFICACIA DELLA STIMOLAZIONE CAPACITIVA

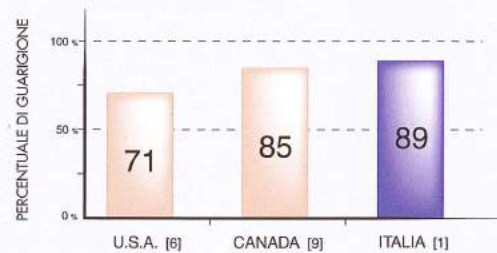


OsteoBit is also small and light, easy to use and fully compatible with daily activities.



## Instructions

Duration of treatment: 10 hours/day till complete recovery. The specific IGEA electrodes must be applied directly onto the skin. OsteoBit can be used in presence of internal synthesis devices.

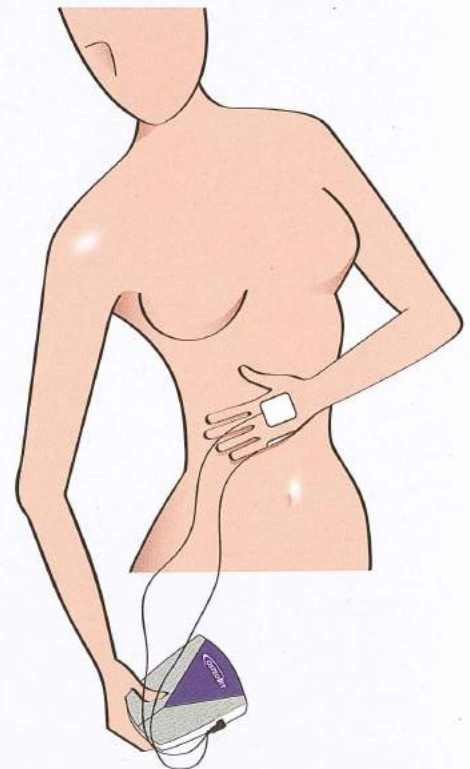

Signal: sinusoidal wave 60 kHz  
Signal duty cycle: 50 %  
Weight: 136 gr. (battery included)  
Dimensions: 70 x 27 mm  
Battery: up to 20h of use  
Complies with IEC 601-1 and IEC-601-2-10  
Certified by IMQ  
Complies with 93/42/EEC and marked CE 0051

## BIBLIOGRAFIA

- [1] Mattei A., Spurio Pompili G.F., Impagliazzo A.: Nostra esperienza sul trattamento dei ritardi di consolidazione e delle pseudoartrosi con stimolatore capacitivo. Consensus Conference "Le Pseudoartrosi" - Sesto di Pusteria (BZ), 2002
- [2] Mattei A., Spurio Pompili G.F., Impagliazzo A.: Esperienza sul trattamento dei ritardi di consolidazione e delle pseudoartrosi con stimolatore capacitivo. VII Corso Internazionale - Stimolazione biofisica della riparazione endogena nel tessuto osseo e cartilagineo, Ospedaletto di Pescantina, 2001
- [3] "Consensus Conference" Impiego della stimolazione elettrica e magnetica in ortopedia e traumatologia, Italian Journal of Orthopaedics and Traumatology, 24, 1, 13-31, 1998
- [4] Bassett C.A., Mitchell S.N., Gaston S.R.: Pulsing electromagnetic field treatment in ununited fractures and failed arthrodeses. JAMA, 5, 247(5), 623-862, 1982
- [5] Traina G.C., Cadossi R., Ceccherelli G., Dal Monte A., Fontanesi G., Giancetti F., Mammi G.I., Negri V., Pisano F., Poli G., Rinaldi E., Virgili B.: La modulazione elettrica della osteogenesi. Giornale Italiano di Ortopedia, Suppl.XII (2), 165-176, 1986
- [6] Brighton C.T., Wang W., Seldes R., Zhang G., Pollack S.R.: Signal transduction in electrically stimulated bone cells. J.B.J.S., 83-A, 1514-1523, 2001
- [7] Brighton C.T., Pollack S.R.: Treatment of recalcitrant non-union with a capacitively coupled electrical field. J.B.J.S., 67-A, 577-585, 1985
- [8] Brighton C.T., Shaman P., Heppenstall R.B., Esterhai J.L., Pollack S.R., Friedenber Z.B.: Tibial nonunion treated with direct current, capacitive coupling, or bone graft. Clin Orthop, (321): 223-234, 1995
- [9] MacDonald M., Bonneau M.: Clinical experience with capacitively-coupled electric fields. 3rd International Conference on Bioelectromagnetism and 1st Slovenian-Croatian Meeting on Biomedical Engineering, 8-12 October 2000
- [10] Goodwin C.B., Brighton C.T., Guyer R.D., Johnson J.R., Light K.I., Yuan H.A.: A double-blind study of capacitively coupled electrical stimulation as an adjunct to lumbar spinal fusions. Spine, Vol. 24, 13, 1349-1357, 1999
- [11] Carter E.L., Vresilovic E.J., Pollack S.R., Brighton C.T.: Field distributions in vertebral bodies of the rat during electrical stimulation: a parametric study. IEEE Trans. Biomed. Eng., Vol.36, 333-345, 1987

**IGEA**

Via Parmenide 10/A 41012 Carpi (Mo) Italy  
tel. 059 699600 fax 059 695778 www.igea.it e-mail: info@igea.it